


 Electric Ink[®]

nano PEN

MANUAL



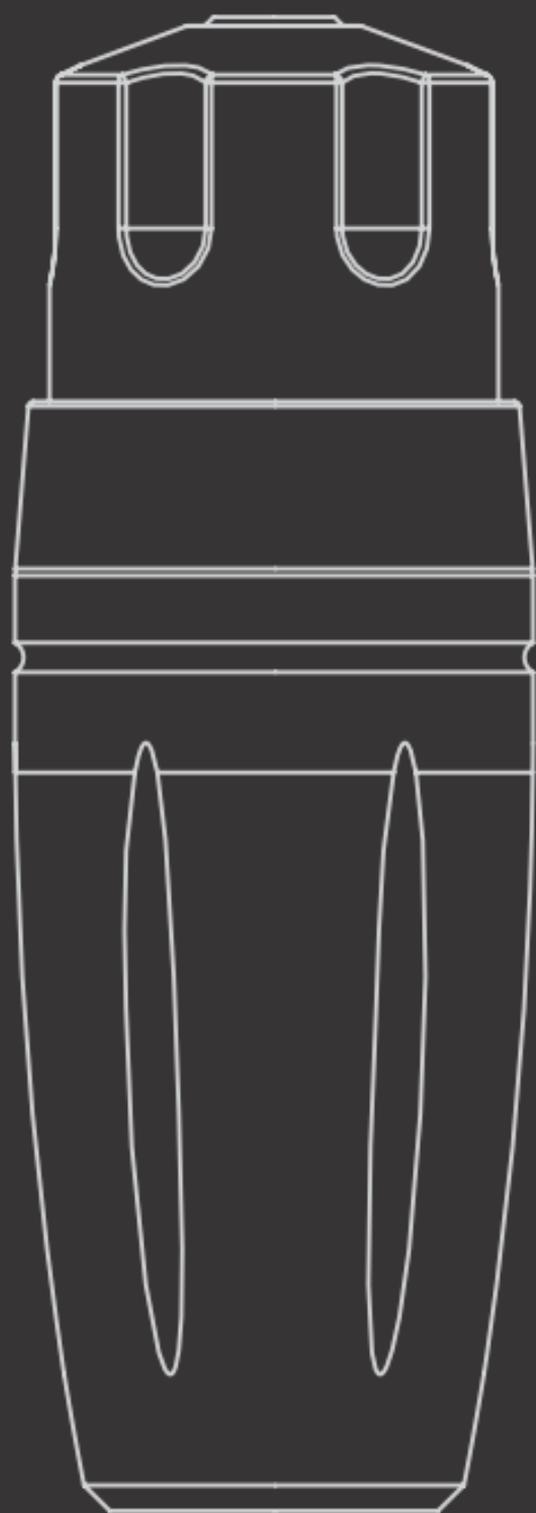

INTRODUÇÃO

Parabéns! Você acaba de adquirir a sua Nano Pen.

A Nano Pen é resultado de testes, estudos e pesquisas feitos por engenheiros e tatuadores.

Leia atentamente o Manual antes de utilizar sua máquina.

ÍNDICE

Apresentação	07
Sistema	07
Conteúdo	08
Conheça sua Máquina	08
Características Técnicas	09
Acessórios	09
Indicações de Uso	10
Preparando para Utilização	10
Importante	12
Termo de Garantia	12
Restrições da Garantia	14

APRESENTAÇÃO

Baseada na consagrada Electric Ink Pen, desenvolvemos a mais nova integrante do time, a Electric Ink Nano Pen. A máquina foi desenvolvida com o objetivo de ser menor que a versão original, porém com uma mecânica tão precisa quanto. Resultado de um estudo de engenharia profundo, a Nano Pen foi desenvolvida para ser uma máquina com sistema altamente eficiente e silencioso, sem perder sua principal característica, a dinâmica da batida que conquistou a todos que usaram a Electric Ink Pen. Por ser uma máquina mais curta, o seu centro de gravidade fica no meio da mão, sem gerar o efeito de alavanca, que aliado com o plug magnético proporciona mais liberdade de movimento ao artista. Surpreenda-se com a inigualável Nano Pen! Disponível nas versões Electric Ink (para cartuchos Electric Ink) e For Export (para cartuchos universais).


SISTEMA

A Nano Pen possui batida senoidal, mantendo a agulha por mais tempo na pele, dessa forma facilita e acelera o processo de pigmentação para o profissional tatuador. A máquina possui uma mecânica de alta precisão, baixa vibração, ruído e manutenção.

CONTEÚDO

- 1 Máquina Nano Pen
- 1 Cabo Magnético
- 1 Manual via QR Code

CONHEÇA SUA MÁQUINA

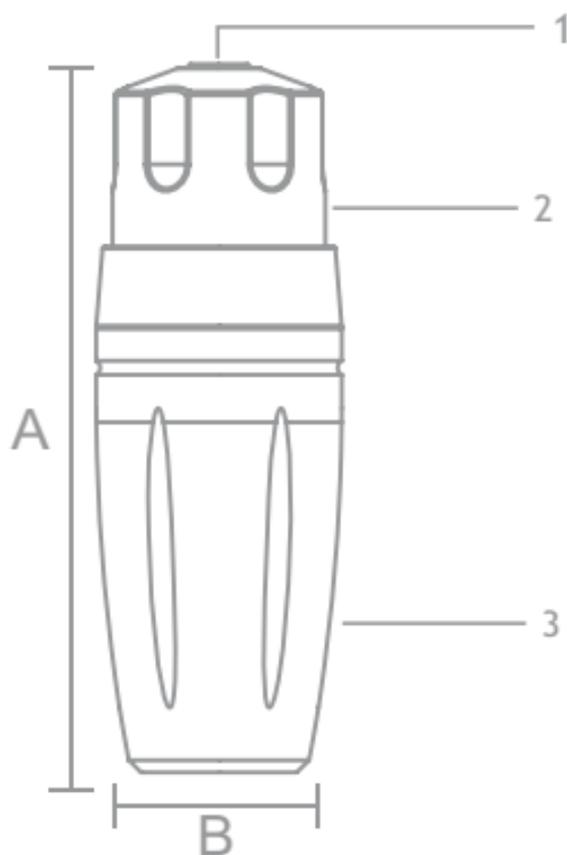

- 1- Conexão com Plug Magnético
- 2- Cápsula do Motor
- 3- Grip

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	Motor de Precisão DC
Tensão	6 à 12v
Consumo Médio	1.1w
Conexão Elétrica	Magnético
Corrente de Partida	280mA
Frequência de Perfuração	61 à 108 PPS
Curso	3,3mm
Saliência da Agulha	Conforme ajuste do grip
Peso	120 gramas
A (Diâmetro)	30 mm
B (Comprimento)	88 mm
Registro ANVISA	80485730005

ACESSÓRIOS

Os acessórios necessários para utilização da Nano Pen, com exceção dos cartuchos universais, podem ser adquiridos separadamente através do site: www.electricink.com.br

- Fonte de Alimentação Electric Ink;
- Pedal;
- Tintas para Tatuagem Electric Ink, Everlast ou Easy Glow;
- Cartuchos Electric Ink;
- Batoques esterilizados InkCaps;
- Protetor Plástico de Proteção da Máquina;
- Protetor Plástico de Proteção do Cabo.

INDICAÇÕES DE USO

Uso indicado para tatuadores profissionais.
Atenção especial aos itens abaixo:

- Manuseio do equipamento;
- Cuidados básicos de higiene e segurança;
- Profundidade da penetração da agulha na pele;
- Aplicação da tinta;
- Conhecimento sobre cicatrização da pele após o procedimento.

PREPARANDO PARA UTILIZAÇÃO


Consulte o manual da fonte de alimentação utilizada.

Ligue a fonte de alimentação na tomada.

Em caso de utilização com pedal, conecte-o na fonte de alimentação no local indicado para pedal.

Coloque luvas descartáveis.


Conecte o cabo do plug magnético corretamente na saída da fonte de alimentação indicada e o plug magnético na Nano Pen.

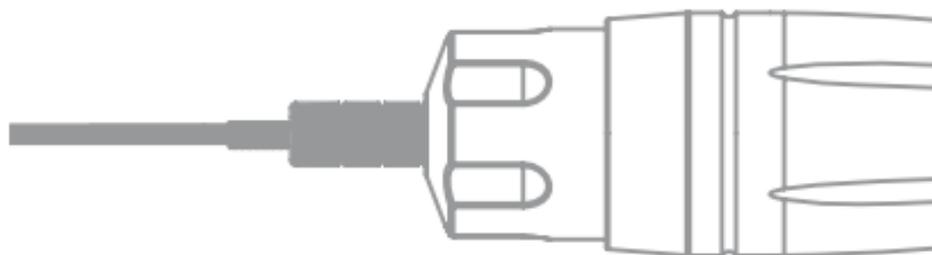

Cubra a Nano Pen com plástico descartável adequado de proteção contra contaminação.

Insira o cartucho na Nano Pen na abertura indicada abaixo.


Gire o cartucho 90° no sentido horário.

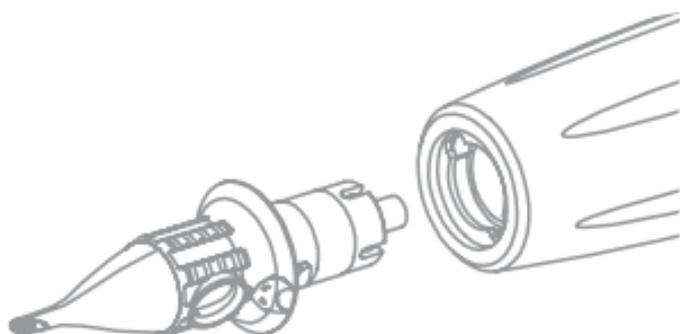

Atenção: Risco de perfuração ao manusear o cartucho.

Verifique se o cartucho está encaixado corretamente.

Para retirar o cartucho da Nano Pen, gire-o no sentido anti-horário.

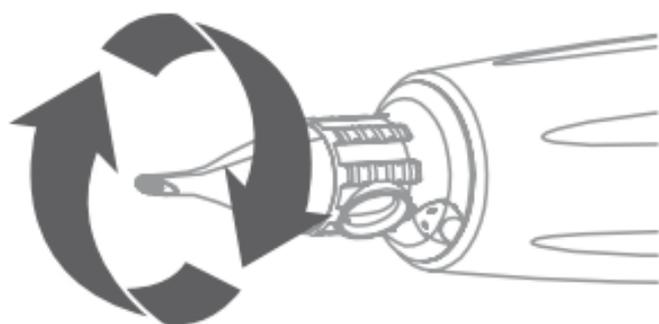

Ligue a fonte de alimentação e regule a voltagem corretamente de acordo com a indicação recomendada.

Mínimo: 6,0 Volts

Máximo: 12 Volts

Separe todos os outros materiais que serão utilizados (tintas, batoques esterilizados, etc.) e organize a bancada. Troque as luvas descartáveis e inicie o procedimento.

IMPORTANTE

Condições de Armazenamento:

·Em caso de exposição em altas temperaturas, não ligue a sua máquina pois pode danificar o motor. Aguarde o resfriamento até a temperatura ambiente;

·Líquidos podem causar danos no motor;

·Jamais mergulhe a máquina em líquidos;

·Não tente lubrificar;

·**Nunca tente retirar a tampa e nem desparafusar a proteção do motor, pois pode ocasionar perda de peças pequenas, molas, arruelas, causar deslocamento do motor, além de causar a quebra da máquina;**

·Antes do processo de tatuagem, cubra a máquina com plástico descartável adequado;

·Mantenha a máquina sempre limpa e livre de resíduos.

TERMO DE GARANTIA

Os produtos fabricados pela **ELECTRIC INK**, são testados em um processo de Controle de Qualidade que garante aos usuários confiança e tranquilidade na execução de seus trabalhos.

A **ELECTRIC INK** assegura a seus produtos, na forma da legislação vigente, garantia sobre o produto (mediante apresentação de Nota Fiscal de compra), contra defeito de fabricação que o mesmo venha a apresentar no prazo de:

- 90 (noventa) dias de Garantia Legal, mais 9 (nove) meses de Garantia Contratual, totalizando 12 (doze) meses, a contar da data de emissão da Nota Fiscal. A garantia para produtos comercializados por revendedores inicia-se a partir da emissão da Nota Fiscal / Venda ao cliente final. (Exija sua nota Fiscal).

A **ELECTRIC INK** garante ao consumidor o envio e reenvio dos produtos para assistência técnica, dentro do prazo da garantia legal, ou seja, 90 (noventa) dias, após esse prazo, o envio e reenvio é por conta do cliente.

A garantia **ELECTRIC INK** contra defeitos de fabricação passa a contar a partir da aquisição do produto pelo consumidor, comprovada mediante apresentação da Nota Fiscal de compra do respectivo item.

Para efeitos de garantia, o produto deverá ser encaminhado para o Suporte Técnico da **ELECTRIC INK** acompanhado da Nota Fiscal e os itens que acompanham a máquina, no qual será submetido a análise.

Durante a vigência da garantia, estará incluso a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços a serem executados pelo Suporte Técnico **ELECTRIC INK**, quando constatado defeito de fabricação do item.

Caso o produto não esteja mais disponível no portfólio da empresa e apresente defeito dentro do prazo de garantia, serão tomadas as seguintes providências:

- a) Substituição por outro produto com a mesma função dentro do prazo de 90 dias;
- b) Abatimento do valor se o defeito não inviabilizar a utilização do produto.

A medida a ser tomada vai depender de cada caso e a critério da **ELECTRIC INK**.

Nenhuma outra garantia, de qualquer tipo, seja expressa, tácita ou implícita, poderá ser oferecida por revendedores.

RESTRICÇÕES DA GARANTIA

A garantia **ELECTRIC INK** contra defeitos de fabricação perderá a sua validade nas seguintes situações:

- Uso inadequado ou em desacordo com o manual de instruções do respectivo produto ou acessório;
- Utilização do produto em ambientes sujeitos a umidade excessiva, temperatura de operação fora dos limites especificados no manual de instruções do respectivo produto ou acessório;
- Danos causados por acidentes e quedas;
- Danos decorrentes do transporte ou embalagem inadequada, utilizados pelo cliente;
- Apresentação de sinais de violação, ajuste, conserto ou modificação por pessoa não autorizada pela **ELECTRIC INK**;
- Defeitos e danos causados pelo uso de acessórios não compatíveis com as especificações dos produtos **ELECTRIC INK**;
- Produtos que tenham seu número de série removidos, adulterados ou tornados ilegíveis;
- Desgaste natural das peças;

No caso de perda de garantia por um dos motivos citados neste Termo, o reparo do produto estará sujeito a orçamento prévio.

Também será considerada nula a garantia se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras ou modificações;

A **ELECTRIC INK** assegura a todos os produtos fabricados pela marca, o prazo de 30 dias, contados a partir da entrega do produto na assistência técnica, para efetuar o reparo/conserto do produto.

SEMPRE avalie os produtos e os itens que o acompanham no ato da entrega. Qualquer anormalidade deverá ser comunicada **IMEDIATAMENTE** à Electric Ink.

BELLE ARTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Av. Cel. Zacarias Borges de Araújo, 1200 | Uberaba/MG
CNPJ: 08.244.232/0001-05
Insc. Est. 001.015.986.0024
Resp. Técnico: Josiene de Paula
CRQ/MG nº: 02410919 - 2ª Região
Reg. Anvisa: 80485730005
Máquina Aplicadora de
Tatuagem e Micropigmentação
INDÚSTRIA BRASILEIRA

sac@electricink.com.br
55 (34) 3326.7000



www.electricink.com.br



ELECTRIC INK®